



NIKOLA TESLA JE PRVI UOČIO BLAGOTVORNO DEJSTVO ELEKTRICITETA NA ZDRAVLJE I SKRENUO LEKARIMA PAŽNJU NA ISCELJITELJSKU MOĆ VISOKOFREKVENTNIH ZRAČENJA

“Medicina budućnosti biće posvećena ispitivanju uticaja energetske vibracije na ljudski organizam“ – Prof. Dr. William Tiller nobelovac

Naši aparati primenjuju elektroforezu odnosno elektroterapiju koja u medicini predstavlja primenu električne struje u cilju postizanja terapijskog efekta na telo pacijenta. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta električne energije na strukturu mišićnog i nervnog sistema.

Elektroterapija postiže sledeće:

- toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije
- analgetski efekat – stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola
- povećanje mišićne mase i stimulacija oštećenih nervnih vlakana i anti-edematozni efekat.
- Pomaže kod lokalnih zapaljenja potkožnog tkiva ili nekog zgloba
- fibroznih promena mišića i periartikularnih tkiva
- posttraumatskih stanja i sportskih povreda (uganuća-iščašjenja zglobova, prelomi)
- zapaljenskih degenerativnih reumatskih oboljenja (reumatoidni artritis, Mb.Bechterew)
- vanzglobnog reumatizma (periartritis, burzitis, tendinitis, entezopatije...)
- stanja nakon povrede perifernih nerava



MAGIC-GEN-SL -Pocket size je jedinstven aparat u svetu sa pet mogućih tretmana za čovekovo zdravlje

Aparat **MAGIC-GEN** pripada novoj generaciji aparata na principu Teslinih skalarnih talasa, kao i na značajnim rezultatima primene frekvencija dr. Rolanda Rajfa koji ima pet funkcija delovanja na čovečiji organizam.

Koristi se kod zdravstvenih problema kao i preventivno. Predviđeno je za mobilnu upotrebu, znači korišćenje prenosno prilikom rada, šetnje itd.

Može se birati između tri vrste tretmana preko jednog prekidača sa tri položaja:

1. **Otklanjanja jakih i hroničnih bolova** usled reume, išijasa, tendinitisa, artritisa, neuralgija... U cilju regeneracije oštećenja na ćelijama, elektromagnetni talasi generisani u ovom aparatu deluju na subćelijskom tj genetskom nivou. Kada dođe do regeneracije tkiva, nema ni bolnih signala.
2. **AKUTNE UPALE:** Prema dr. Rajfu impulsi u ovom opsegu su delotvorni kod velikog broja degenerativnih, hroničnih i akutnih upala i bolesti. (skeniranje impulsa od 700 do 2.000Hz)
3. **TEŠKE BOLESTI, SARKOMI, KARCINOMI:** frekvencije koje na bioresonantnom principu podupiru terapiju kod navedenih teških bolesti takodje po principu dr. Rajfa skeniranjem impulsa u opsegu 2.000 do 3.000Hz)

i još dodatne dve funkcije su:

4. **Sam aparat potpuno automatski, po uključanju, zrači pozitivnim elektromagnetnim vibracijama na bližu okolinu.**
5. **Uz aparat se dobije uputstvo o povezanosti pojedinih delova kičmenog stuba i odgovarajućih organa,** pa se delovanjem na pojedine pršljenove preko samolepljivih elektroda može pozitivno delovati na energetske stanje organa.

MAGIC-GEN je bioelektromagnetni generator koji vrši direktnu regeneraciju bolnog i oštećenog mesta, zasniva se na frekvencijama koje se koriste u biogenetici za opravku i regeneraciju gena. Tu se podrazumeva proces, gde se na gene tj. na DNK deluje elektromagnetnim talasima.

Elektromagnetnim talasima, preko velikih samolepljivih elektroda, aparat sa specifičnim frekventnim impulsima stimuliše direktno na telu gde je to potrebno. Pri tome se intenzitet dejstva individualno reguliše tako da bolno mesto samo prijatno bridi.

Prema dr. Rajfu šalje potpuni biofrekventni opseg frekvence, preko elektroda efikasno deluje na stanje organizma kod kog su prisutne akutne upale. Održavanjem optimalnog biofrekventnog nivoa organizma pomaže u lečenju mnogih ozbiljnih bolesti.

Aparat je baziran na odobrenom patentu: Uređaj za radioterapiju živih bića ili delova tela i organa elektromagnetnim poljem.

Garancija: 24 meseci

Classification: EU medical products class 1 - EN 60601 I CE certifikat



UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MAGIC-GEN-SL**:

Pre primene aparata je neophodno obezbediti nesmetan rad bubrega tj. piti dovoljno negazirane vode ili čaja!

- Pripremiti samolepljive elektrode namazati sa tankim slojem elektrogela i postaviti na delove tela koje želimo da tretiramo...
- **VAŽNO:** Dugme jačine impulsa- intenziteta okrenuti sasvim u levo, najmanja jačina
- Uključiti uređaj prebacivanjem šaltera na ON, i podesiti prekidač za izbor rada tj. opsega delovanja 1, 2 ili 3 frekvencija.
- Uključiti aparat sa prekidačem ON i LED se pali i gasi i pokazuje da aparat radi.
- Intenzitet delovanja biofrekventnih impulsa se individualno bira okretanjem dugmeta za jačinu u desno te svtli LED intenzitet.

Primenjuju se samolepljive elektrode. Kontrolna LED lampica (iznad dugmeta INTENSITY) pokazuje da li prolaze impulsi preko elektroda ili su provodnici u prekidu. Elektrode se apliciraju na bolna mesta ili stomak ili druge delove tela. Jačina impulsa ne treba da bude prejaka već se individualno podešava.

Obzirom da se radi o seriji isceljujućih frekvencija koje se nekad jače a nekad slabije osećaju potrebno je podešavati jačinu impulsa da nisu prejaki i to tokom celog tretmana. Čak i u slučaju početnih nelagodnih reakcija - koje su posledica eliminacije parazita i nagomilanih toksina, tretman treba nastaviti do poboljšanja. Punjenje se vrši svaki dan posle primene najmanje 8 sati, može preko noći. Elektrode moraju dobro da nalegnu – primeniti gumirani zavoj ili povez.

Preventivni tretman primenjivati povremeno oko jedan sat i svakako odmah po pojavi početnih znakova nekih problema. Tretman nastavliti svaka dva do tri dana a kod akutnih bolesti i svakodnevno može I više puta. Primena biofrekventne metode ne ostavlja nikakve negativne posledice. **Preporučuje se tretman impulsima oko jedan sat ili po potrebi (individualno) može I duže.**

Elektorostimulacija se vrši samolepljivim elektrodama direktno na bolna mesta ili po sopstvenom izboru. **MAGIC-GEN** emituje specifične frekvencije i to je oblik elektrotretmana zasnovan na modernim naučnim saznanjima. Aplikacijom elektroda na bolno mesto i korišćenjem elektromagnetnih talasa sa specifičnim frekvencijama, ostvaruje se pozitivno dejstvo u smislu smanjenja napetosti mišića, smanjenja bolova kod lumbaga, snižavanja stepena izraženosti hroničnih bolova u leđima i zglobovima. Uz dodatak Šumanovih talasa je dejstvo efikasnije. Stimulativno dejstvo se ostvaruje aplikacijom bakarnih ili samolepljivih elektroda u trajanju od 60 minuta na bolno mesto. Pri tome se oseća zaista prijatno delovanje bez bola. Može se koristiti i par puta dnevno dok ne prestane bol ili spazam. **MAGIC-GEN** je bioelektromagnetni generator čiji je rad zasnovan na saznanjima iz oblasti talasne genetike, regeneriše ćelije bolnog mesta. Ima potencijal da regeneriše ćelije i može da produži produži vek života.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: - Aparat **MAGIC-GEN** sa ugrađenim Li-ion Akumulatorima 3 kom. po 3,7V/1Ah certificiran CE - Niskofrekventni impulsi do 10.000 Hz - Mrežni adapter 100-240VAC (50-60Hz) / 15V DC 1A certificiran CE i TUV

VAŽNO: Posle primene aparata je potrebno priključiti aparat u struju preko adaptera, 8 sati ili duže da se napuni. Redovno punjenje ugrađenih akumulatora je veoma važno.

PAŽNJA: Korišćenje aparata se ne preporučuje osobama sa ugrađenim pace-makerom i trudnicama. Uredjaji su predviđeni kao dopuna uz lekarsku terapiju. Nisu predviđena za dijagnostiku ili lečenje bilo kakvih medicinskih problema. Navedene tabele biofrekvencija su izvorno objavljene preko interneta i iznesene informacije se ne smeju koristiti kao medicinski savet.




Počasna doktorska titula komplementarne medicine

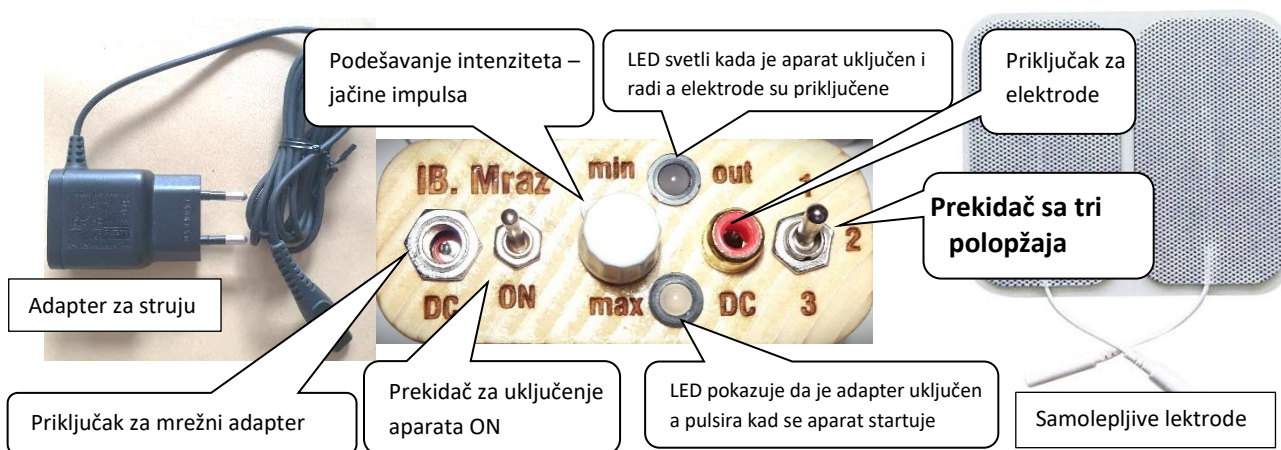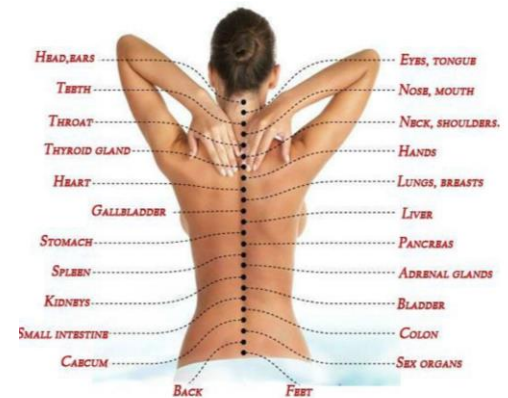

Delovanjem na pojedine pršljenove preko samolepljivih elektroda se može vršiti terapija i delovati na energetske stanje organa.

Kičmeni stub, koji se češće naziva kičma, sastoji se prvenstveno od pršljenova, diskova i kičmene moždine. Delujući kao komunikacioni kanal za mozak, signali se prenose i primaju kroz kičmenu moždinu.

The spinal column, more commonly called the backbone, is made up primarily of vertebrae, discs, and the spinal cord. Acting as a communication conduit for the brain, signals are transmitted and received through the spinal cord.

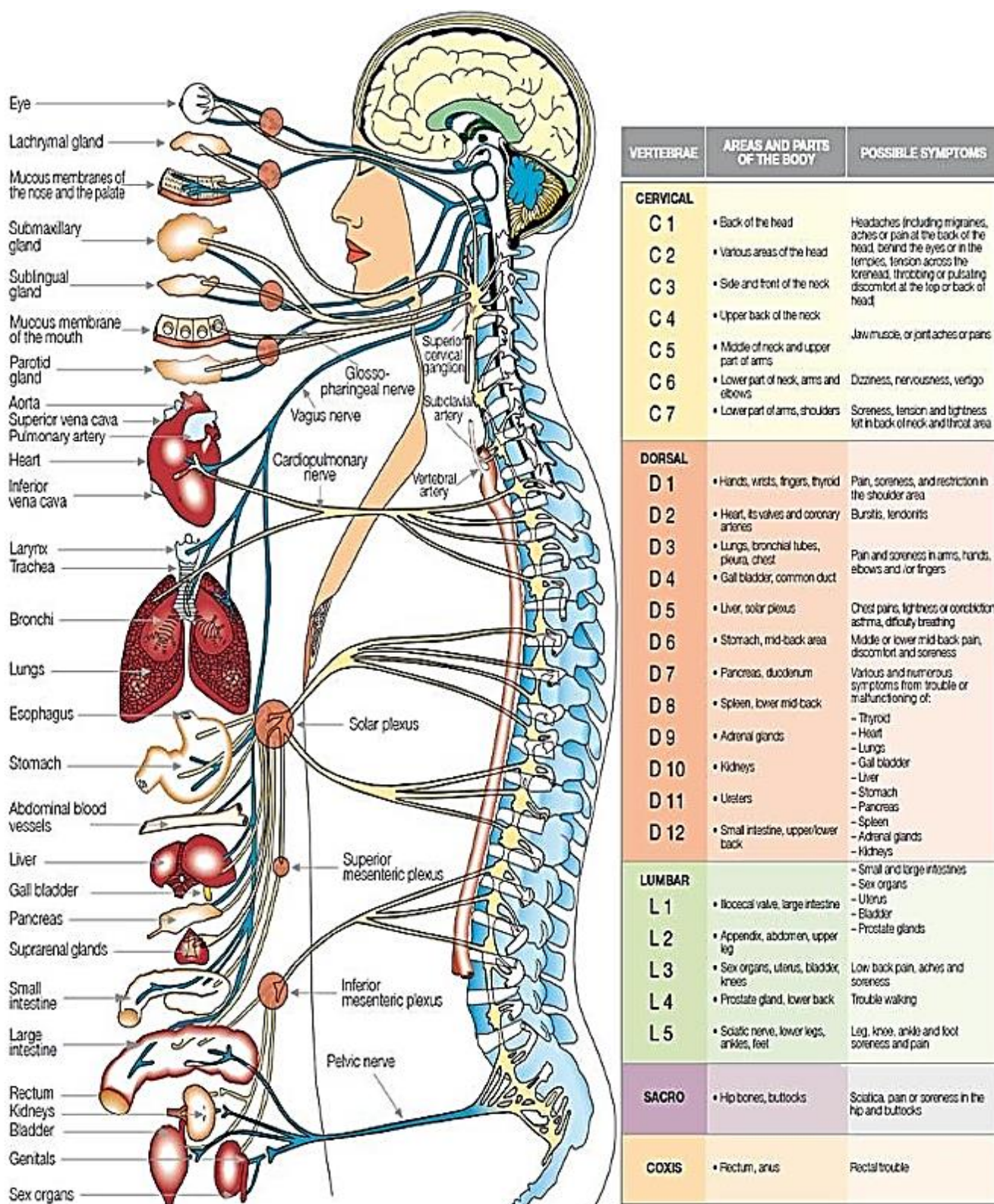

Kratko uputstvo kod zdravstvenih problema

Izostaviti: Meso, rafinirani šećer, belo brašno, veštačke boje i arome, sve izvore teskih metala npr. aluminijumske folije i posuđe sa niklom. Plastika, fluorid i jod. Zračenje i kemoterapiju najbolje izbeći.

Jesti živu hranu: što više sirovog voća i povrća koje nije tretirano pesticidima, uzimati visoke doze C vitamina, ako je bilo zračenje i kemoterapija C vitamin intravenozno. Pretežno koristiti bazne namirnice.

Boraviti na suncu i piti izvorsku ili oživiljenu vodu, piti čajeve za čišćenje ako je moguće Brojsov čaj za bubrege, piti lekovitu glinu, najbolje zeolit i ako je moguće svakodnevno klistir.

Jako je važno potruditi se da bolesnik bude u optimističnoj i harmoniskoj atmosferi sa uverenjem da će prebroditi bolest, znači pozitivan stav!

Preporučujemo dodatno antiparazitni program po Clark:

<http://alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/ciscenje-od-parazita>

10 pravila za život bez bolesti i kancera: Stručnjaci objavili detaljno uputstvo!

Svetski fond za istraživanje raka tvrdi da su i najmanje količine alkohola i prerađenog mesa štetne za organizam i da povećavaju šanse za oboljenje od kancera.

Ovo su njihove smernice za zdraviji život:

1. Održavajte zdravu težinu
2. Budite fizički aktivni, hodajte više, manje sedite
3. Jedite hranu bogatu **celim žitaricama**, **povrćem**, **voćem** i mahunarkama
4. Izbacite brzu ili drugu prerađenu hranu bogatu masnoćama
5. Ograničite **crveno meso** i mesne prerađevine. Crveno meso jedite u vrlo malim količinama, a prerađevine izbacite
6. Izbacite zaslađena pića, pijte samo vodu ili nezaslađena pića
7. Ograničite konzumaciju alkohola, a da biste izbegli rak, nemojte ga uopšte piti
8. Ne koristite proizvode za prevenciju raka
9. Majke, **dojite svoju decu**

PREUZETO IZ: <https://stil.kurir.rs/lepi-zdravi/medicina/85365/10-pravila-za-zivot-bez-bolesti-i-kancera-strucnjaci-objavili-detaljno-uputstvo>

JOŠ JEDNO ISKUSTVO :

MultiGen – tretman po dr. Rajfu - iskustvo "Pacijen rođak I.K. je koristio multiGen kod metastaza kancera , koji se pojavio sekundarno kod bešike, prostate. nakon korišćenja aparata , sa promenom načina ishrane , prelaskom na skroz biljnu ishranu i korišćenjem semenki kajsija , sve zajedno već za nekoliko nedelja došlo je do poboljšanja koje se očitivalo na MR u vidu smanjenja tumora sa 1,4l na 0.9l. Posle toga je došlo do ubrzanog izbacivanje sadržaja kroz kateter koji je bio zakačen pa se morala smanjiti amperaža. Pacijent je iako otpisan od strane zvanične medicine oslobođen svih tumora pomoću ovih alternativnih metoda."

Milan Nikolić dipl. Dijetetičar-Nutricionista Stručni savetnik za Biljnu ishranu, Fitoterapiju i načela Prirodne medicine

ISKUSTVA KORISNIKA sa aparatom **MAGIC-GEN**

ISKUSTVO PRIMENE MAGIC-GEN aparata sa funkcijom protiv sarkoma i karcinoma

Nebojša, 64 godine počeo da koristi uređaj u oktobru. Dijagnoza skvamocelularni karcinom pluća IV stadijum.

Nije mogao da izgovori duze recenice i umarao se posle nekoliko koraka. Svaki dan držao elektrode na grudima po tri puta dnevno u trajanju od 75 minuta. Posle 20 dana je polako počelo sa poboljšanjem.

Sada se oseća bolje, ima više snage, ide u duze setnje.

Donnerstag, 01. Februar 2024 um 08:13 Uhr Von: "Duda" <thepartalo@gmail.com>

Betreff: Iskustvo porodice Pešalj "Aparat magic gen koristimo već dve godine. Ideja nam je bila da zbog korona virusa uključimo i tretmane ovim aparatom kao preventivu i u slučaju da se zarazimo. Kako imamo troje dece smatrali smo da može biti korisno i za neke respiratorne viruse, koji su svakodnevica u kolektivima. Onda smo shvatili da aparatom možemo tretirati i bolna mesta, upale mišića ili nerava. Ono sa čim se ja često susrećem su bolne išijalgije kao posledica disus hernie. Aparat sam koristila takodje i za povremene bolove u kolenu. Bol se uvek smanjio ili potpuno nestao i ubrzo sam se vraćala vežbanju i redovnim aktivnostima. Što se tiče virusnih i bakterijskih infekcija najbolji su efekti kod dece ako se sa primenom aparata krene odmah pri prvim simptomima. Olakšavao nam je glavobolje, groznice i iscrpljenost. Brže smo se oporavljali i ono sto je veoma važno, ove terapije nisu agresivne i odbojne deci, ne stvaraju otpor i nema ubeđivanja. Zahvalni smo na ovom poklonu i velika nam je pomoć u 'kućnoj apoteci'."

Gesendet: Freitag, 18. November 2022 um 19:28 Uhr Von: "Maja Lukač" milkamajalukac@gmail.com An: ib.mraz@web.de Betreff: Utisci o aparatu Magic-gen

Korisnik sam aparata "Magic-gen" već tri godine i želim svima da prenesem moje iskustvo u vezi sa njim.

Naime, još kao dete u Osnovnoj školi sam imala problem sa uklještenjem nerva u ramenom delu koje je dovelo do atrofije ruke. Takodje sam u ruci imala osećaj hladnoće jer nisam imala cirkulaciju a i česte glavobolje. Jedini lek su bile intezivne elektro i fizikalne terapije. Ruka mi se posle 10-ak meseci dosta oporavila mada sam bila ograničena u nekim pokretima a najgori je bio tup bol koji je bio svakodnevan. To je tako trajalo skoro 40 godina!

Situacija se potpuno promenula sa "Magic-geom" koji sam koristila svaki dan po 3 - 4 sata, mesec i po dana i sa maksimalnom dozom tako da mi je ruka sama odskakala od tela. Ponekad sam znala i da ga držim po čitavu noć, da zaspeam sa njim. Od tada me ni ruka, ni rame a ni vrat nisu zaboleli više od dve godine. Sad se bolovi ponekad javu ako sam napregla kičmu ili ruku ali to se za dan - dva brzo reši. Želim da se zahvalim g-dinu Čedomiru Mrazu a svima želim sreću i uspeh sa korišćenjem svih vibracionih aparata i život bez bola! Maja Lukač, Novi Sad

Gesendet: Mittwoch, 21. Juli 2021 Von: "Ljiljana Cvjetić" ljiljana.cvjetic68@gmail.com An: "Cedomir Mraz" <ib.mraz@web.de>Betreff: Re: Dobar dan zelim!

Moram da vam pisem i kazem da sam ja prezadovoljna sa vasim aparatom MAGIC-GEN! Kod mene ima vise problema sa oblelim zglobovima-kolena, isijas ,stopalo-Mortonov nerv, kicma i teza povreda ramena....Rezultati posle mesec dana su veliki;bol u donjem delu ledja vise ne osecam,ustajem sasvim normalno bez bola kolena su mi pokretljivija,prestao bol....rame ,povreda teza bolovi su nestali ,mogu da pomeram ruku...cak i radim rukomnisam mogla ni casu vode da uzmem ! Neee mogu vam opisati moju sreću !!!!Bila sam kod dece ,unuka ga sama upotrebljava ;stavlja na stomak; ,pojacava;prvi komentar je bio;Baba ne boli me,pomaze! Zet ima duze vremena problem sa ramenom ,bol u saci,nervi...prva upotreba aparata je bila CUDOOOO!Prestao bol ruka opustenija,on sam nije mogao da veruje koliko mu je bolje..moram jos reci da sam isla na fizikalnu terapiju za rame ..radili su mi struju i ultra zvuk...poboljsanja nije bilo...Bogu hvala sto sam vas slucajno nasla na Yot Tube. Hvala vam za ovaj neverovatan aparat! Svako dobro vam zelim!

Cvjetić Ljiljana, Girardigasse 10/35, 1060 Wien

ISKUSTVA MAGIC-GEN 2022-10 Pre tri meseca sam usled pada, slomila ruku na dva mesta. Nisam nosila gips, niti sam nakon pada snimila ruku. Ubrzo nakon povrede, krenula sam sa primenom Magic Gen S aparata. Primenjivala sam ga dva puta dnevno po 40 minuta, aplikovanjem opšivenih elektroda na bolno mesto, intenziteta koji je meni u tom trenutku odgovarao, primenjujući frekvenciju za bol, nakon čega sam pustala frekvenciju za regeneraciju, na bolno mesto. Bol je bio umeren, nije bilo podliva, jedino je otok bio prisutan. Nakon skoro mesec dana, snimila sam ruku, gde je ustanovljen prelom ulne i kosti ispod članka, pri čemu mi je rečeno da je prelom zarastao. Nedavno sam obavila još jedan kontrolni pregled kod ortopeda (A. G.) koji je upoznat sa povredom, i tom prilikom mi je rekao da je prosto neverovatno da nisam osećala bol velikog intenziteta, kao i da je kost odlično srasla, navodeći da čak i da sam nosila gips, nije siguran da bi kost bolje bila pozicionirana i bolje zarasla. Hvala gospodinu Čedomiru Mrazu. Vesna Č.

G-din C.M. :“ Bolovi u krstima od dugog sedenja, nestali su posle primene aparata dva dana od po sat.

Tek posle mesec dana se morao postupak ponoviti.“

Gospođa B.V. :“Bol u kolenu, samo pola sata držanja elektroda sa obe strane kolena, smanjio se bol a sutradan primećuje da je više ne boli dok se penje stepencama.”

G-đa A.S. farmaceut], „Uz pomoć ovog aparata „ispravila“ sam stariću J.J./88/, u periodu oko mesec dana redovne primene od jedan sat dnevno. Elektrode su bile postavljane levo i desno od kičmenog stuba i svakodnevnim pomeranjem elektroda od krsta na gore do vrata, oko sat dnevno. **Pacijent : Jelica Jovanovic rođena 08.08.1928.godine. Godina 88 Terapija:** Svaki dan aparat jedan sat u isto vreme. 45 dana. Posle pet dana javio se osećaj manje ukočenosti i lagane opuštenosti u nogama. Posle 15 dana pacijent kreće lagano van kuće...šeta...noge u sve opuštenije...Posle 30 dana jos je veća pokretljivost pacijenta.**45-ti dan pacijent nema bolove i kreće se normalno**

Milan Nikolić – tretman po dr. Rajfu: "Pacijent rođak I.K. je koristio multiGen kod metastaza kancera , koji se pojavio sekundarno kod bešike, prostate nakon korišćenja aparata , sa promenom načina ishrane , prelaskom na biljnu ishranu i korišćenjem semenki kajsija , sve zajedno već za nekoliko nedelja došlo je do poboljšanja koje se očitivalo na MR u vidu smanjenja tumora sa 1,4l na 0.9l. Posle toga je došlo do ubrzanog izbacivanja sadržaja kroz kateter koji je bio zakačen pa se morala smanjiti amperaža. Pacijent je iako otpisan od strane zvanične medicine oslobođen svih tumora pomoću ovih alternativnih metoda." **Milan Nikolić dipl. Dijetetičar-Nutricionista Stručni savetnik za Biljnu ishranu, Fitoterapiju i načela Prirodne medicine**

Katarina J., Beograd 42 godine: Diskus herniju izmedju prsljenova L5/S1 i L4/L5 imam vec 10 godina. To je razlog ceste pojave spazma misica duz ledja. Magic gen aparat mi je dosta pomogao sa ovim spazmima, manje osecam bol i samim tim pokretnija sam i veselija. Usled sedalnog posla i rada na kompjuteru, kao i genetske predispozicije, imam okostavanje vrata. Cesto sam imala glavobolje i bol u vratu zbog toga. Redovnim koriscenjem magic gen aprata vrat mi je pokretniji a glavobolje i bol u vratu vise nemam. U skoli i vrticu se pojavio rota virus kod dece. Moja deca od 5 i 8 godina su se zalila na jak bol u stomaku,. Stavila sam im magic gen elektrode na stomak. Sami su podesavali jacinu. Rekli su da im jako prija. Posle terapije bilo im je bolje. Jedan sin je sutradan skroz bio zdrav a drugi je trazio jos sutra da mu stavim magicgen na stomak. Posle toga je bio skroz zdrav.

T.M. 50 god. **Magic-Gen** iskustvo: krajem januara pokidala ligament na ruci u tolikom obimu da je lekar pomenuo da ce možda morati da se reši operativnim putem. Radila **Magic-Gen** ujutro i uveče po 20 - 30 minuta, 15tak dana, (takodje radila vežbe koje je preporučio terapeut i mazala gavez, uzimala homeopatiju - Ruta, Rhus Tox, Arnica) na kontroli posle 15 dana ligament je zarastao 80% što je fantastičan uspeh i ne može se objasniti drugim sredstvima.

2021 Februar: imala pad prilikom kog se iskrenuo zglob u karlici, posle 3 dana primene **Magic-Gen**, ujutro i uveče, po 1 h. prestali su nepodnošljivi bolovi i mogla samostalno da odem do lekara. Neprekidno radila Magic gen po istoj shemi, ujutro i uveče po 1 h i posle 10tak dana došlo do potpunog oporavka i nestajanja svih bolova što je 4 do 6 puta kraće od predviđanja lekara da će sve proći za oko 2-3 meseca!



Veza kičmenog stuba i organa u telu čoveka

ORGANI U TELU

- C1 Snabdevanje velikog mozga krvlju, hipofiza, unutrašnje i srednje uho, simpatički nervni sistem.
- C2 Oči, potiljačni nerv, ušni nerv, jezik, čelo
- C3 Obrazi, spoljno uho, facijalna kost, zubi
- C4 Nos, usna duplja, usta, eustahijeva tuba.
- C5 Glasne žice, grkljan
- C6 Vratni mišići, ramena, krajnici
- C7 Štitna žlezda, sinusni nerv
- T1 Ruke, podlaktice, prsti i nokti, jednjak, bronhije
- T2 Srce, koronarne arterije
- T3 Pluća, bronhije, plućna maramica
- T4 Žučni mehur
- T5 Jetra, sistem krvotoka
- T6 Želudac
- T7 Pankreas
- T8 Slezina
- T9 Bubrezi, nadbubrežna žlezda
- T10 Bubrezi
- T11 Bubrezi i mokraćni kanali
- T12 Tanko crevo, limfni sistem
- L1 Debelo crevo
- L2 Apendiks, epigastrijum
- L3 Polni organi, materica, bešika, kolena
- L4 Prostata, karlični mišići, bedreni živac
- L5 Skočni zglob, članak, stopala
- Išijas, krsta
- K debelo crevo, anus

Cervikalni
(vratni)
pršljenovi
C1-C7

Torakalni
(grudni)
pršljenovi
T1-T12

Lumbalni
(slabinski)
pršljenovi
L1-L5

Sakralni
(krsni)
pršljenovi

Kokcigalni
(repni)



BOLESTI

- C1 Glavobolja, nesаница, vrtoglavica (nesvestica), nervoza, kijavica (nabez), visok pritisak, migrena, slabost živaca (neurostenija), amnezija, hronični umor
- C2 Ozena, alergija, bol u potiljku, očni pritisak, otalgija (bol u uhu), povreda oka, razrokost, slab sluh (gubitak sluha)
- C3 Obojenje živaca (neuralgija), upala nerava, bubuljice (akne), ekcem
- C4 Polenska alergija, žvale, gubitak sluha, bol u grlu, otok krajnika, dilatacija
- C5 Laringitis (zapaljenje grla), promuklost
- C6 Bolovi u vratu, tonzilitis (zapaljenje krajnika), zapaljenje grla, hroničan kašalj
- C7 Prehlade, grip
- T1 Astma, kašalj, teško disanje, bol u ramenu i šakama
- T2 Virusne prehlade
- T3 Grip pleuritis, bronhitis, upala pluća
- T4 Žutica, stomahni herpes
- T5 Groznica, visok pritisak, loša cirkulacija, artritis
- T6 Bolesti želuca, loše varenje, kiselina
- T7 Čir želuca
- T8 Slaba otpornost organizma (loš imunitet)
- T9 Alergija
- T10 Bolesti bubrega, hroničan umor, arteroskleroza, nefritis, pileonefritis
- T11 Bubljiice, ekcemi, potkožni čir, kožne bolesti
- T12 Reumatizam, sterilitet
- L1 Zatvor (tvrda stolica), kolitis, dizenterija, dijareja (proliv),
- L2 Grč, teško disanje
- L3 Obolenje bešika, neredovne i bolne menstruacije brzo zamaranje, znojenje tokom noći, pobačaj, bol kolena
- L4 Bol u leđima, išijas, krstobolja
- L5 Otečen gležanj, slab gležanj, slaba noga, hladna stopala, grčevi u nogama, slaba cirkulacija u donjim udovima
- Krivljenje kičme
- K Repni ili trtični deo – hemoroidi, bol u trtici, svrab

Celokupno stanje našeg organizma zavisi od zdravlja naše kičme.

Ne kaže se uzalud KIČMA JE STUB ŽIVOTA.

Dijagrami kičmenih pršljenova pokazuju povezanost delova kičmenog stuba i organa u telu kao i bolesti koje nastaju kao posledice njihovog disbalansa.