

**TESLA JE PRVI UOČIO BLAGOTVORNO DEJSTVO ELEKTRICITETA  
NA ZDRAVLJE I SKRENUO LEKARIMA PAŽNJU NA  
ISCELJITELJSKU MOĆ VISOKOFREKVENTNIH ZRAČENJA**

Medicina budućnosti biće posvećena ispitivanju uticaja energetskih vibracija na ljudski organizam“ – **Prof. Dr. William Tiller**  
dobitnik Nobelove nagrade, kvantni fizičar sa Stenford Univerziteta.



**Aparat pripada novoj generaciji aparata na principu vibracija skalarnih talasa, koristi se kod zdravstvanih problema i preventivno.**

## **TSW – TESLA SCALAR WAVES**

APARAT TSW je predviđen za unapređenje zdravlja svih bioloških organizama kao i poboljšanje životnog prostora. Aparati pri delovanju emituju ozdravljujuće vibracije i prave zaštitu od nepovoljnih zračenja.

Za početak preporučujemo rad na radnoj frekvenciji od 750 kHz ili nižoj uz poštovanje odgovarajućih udaljenosti između uređaja i korisnika koji se tretiraju, kako je prikazano i tekstualno navedeno na poslednjoj slici.

Preporučeno početno vreme tretmana je 10 do 20 minuta dnevno, a kasnije nakon adaptacije organizma, i duže.

Ako je aparat u prostoriji on će je očistiti od loših zračenja i uticaja kao što su vodeni tokovi, elektrosmog, hartmanovi čvorovi.

Kroz to aktiviranje naš potencijal se lakše i brže razvija, stvaraju se harmonični putevi međucelijske komunikacije koji omogućavaju i fizičkom telu da primi i zadrži isceljujuće informacije a time i egzistenciju na boljoj osnovi.

Prilikom korišćenja aparata može da dođe do individualnih senzacija na pojedinim delovima tela (trnjenje, peckanje i bolovi itd.), što je najčešće znak pokretanja pozitivnih procesa. Ako je neugodno tada menjati frekvenciju i pronaći odgovarajuće vibracije skalarnih talasa koje u organizmu izazivaju prijatan osećaj.

Kod našeg aparata se radi o širokom spektru informacija koje se baziraju na isceljujućim frekvencijama, to je novi način isceljenja na bazi genetskog informativnog sistema.

U njegovoj blizini se osećamo prijatno i nestaje umor. Brzo neutrališe vibracije raznih zračenja i situacija. Kod bolesnih i energetski iscrpljenih ljudi deluje veoma blagotvorno, pročisti bioenergetsko polje, odstrani štetne energije i blokade, ćelije u telu se brzo regenerišu, razne upale se smanje i brzo saniraju, Tako da započinjemo samoizlečenje.

*DNA je neka vrsta prijemnika ali i odašiljača.* Otkriveno je da je glavni zadatak DNA u oblasti bioakustičnog i bioelektričnog prenošenja signala a da zvuk kao i vibracija igraju značajnu ulogu u isceljenju DNA, repariranju oštećenih hromozoma.

Naši geni su nosioci informativnih zapisa ali oni i komuniciraju, kako međusobno tako i sa okolinom. Od davnina su mistici znali da se telo može programirati rečima, slikom, tonom ili mislima, danas je to i naučno objašnjeno kroz vibracije.

# TSW – TESLA SCALAR WAVES

Promene na telesnoj, emocionalnoj i mentalnoj ravni se mogu postići dejstvom skalarnog polja ovog aparata:

Aparati koji stvaraju pulsirajuća polja sila sa skalarnim talasima i frekvencija Šumanove rezonance mogu naročito efikasno da nas zaštite od elektromagnetnih remetećih frekvencija i pomažu da razvijemo potpuni umni potencijal. Ujedno olakšavaju postizanje telesne, emocionalne i mentalne ravnoteže.

## Stimulacija samoizlečenja i razvijanje potencijala pomoću frekvencija

Od kako je 20-ih godina prethodnog veka razvijen prvi EEG, naučnici su saznali da naš mozak proizvodi elektromagnetne talase koji se mogu podeliti na četiri različita tipa. Pri tome su prelazi sa jednog na drugi naravno prirodni.

TSW aparat emituje vibracije od oko 200.000Hz do oko 900.000Hz, niže frekvencije oko 200.kHz deluju na noge, srednje od oko 400. do 600. kHz na stomak i unutrašnje organe a visoke od oko 900.kHz na glavu i mozak i mogu modulisati sledećim frekvencijama:

**Delta-talasi (ispod 4 Hz)** Delta-talasi pre svega pomažu dubinsko opuštanje, omogućavaju maksimalnu telesnu i umnu regeneraciju, lako uvode u faze sna i dubokog sna i podstiču lučenje telu svojstvenih hormona rasta.

**Teta-talasi (4 Hz – 8 Hz)** Teta talasi olakšavaju pristup skrivenom znanju, jačaju intuiciju i olakšavaju vizualizaciju i uopšteno podstiču veći stepen kreativnosti.

**Istražitelji svesti smatraju da je naročito važna takozvana Šumanova frekvencija (7,8 Hz).** To je navodno frekvencija kojom oscilira planeta Zemlja i koja je neophodna za čovečji život (svaka svemirska letelica je opremljena odgovarajućim generatorom magnetnog polja), **ona podstiče opuštenu kreativnost i omogućava nam pristup intuitivnom znanju** ('znanju Zemlje' o morfo-genetskim poljima).

### **Alfa-talasi (8 Hz – 13 Hz)**

Alfa talasi nisu mentalno fokusirani, šire miran i prijatan osećaj, drže naš mozak u jednom pretežno neutralnom stanju i izuzetno su podobni za razgradnju stresa opuštanjem.

### **Beta-talasi (13 Hz do preko 100 Hz)**

Beta-talasi koncentrišu našu svest usmerenu ka spolja, jačaju koncentraciju prilikom spoljnih aktivnosti i 'pomažu' kada se bavimo rešavanjem konkretnih problema.



# TSW – TESLA SCALAR WAVES


**1 - Generator skalarnih talasa TSW se uključuje prekidačem «POWER» u položaj 10 min, a potom pritiskanjem tastera «START».** Tada odgovarajuća LED dioda zasvetli crvenom bojom, označavajući da je aparat aktivan i da generiše polje u trajanju od 10 minuta. Ponovnim pritiskanjem tastera «START» nastavlja se uključenje tokom daljih 10 minuta. Prekidač «POWER» ima i položaj «cont. ON» koji se može po želji koristiti ako je poželjno duže delovanje. Kod biljaka se omogućava njihov brži rast i razvoj i iz iskustva dovoljno da se deluje 2 sata dnevno.

Aparat se može individualno koristiti po pola sata ili po želji duže kada se uključi «cont. ON» .

**2 - Izbor radne frekvencije vrši se potenciometrom «HF Frequency».** Frekvencija «HF Frequency» oscilatora se može menjati u opsegu od oko 200 – 900 kHz. Odabrana frekvencija je prikazana na displeju uređaja.

**3 - Energetsko polje koje se formira posle aktivnog delovanja,** opstaje još jedno vreme, tako da deluje i za vreme pauze (dokazano snimcima učinjenhi PIP kamerom)! Preporuka je da aktivno delovanje bude 10 min sa pauzama od nekoliko sati. Posle faze privikavanja aktivno delovanje se može produžiti i/ili pauze smanjiti.

**4 - Moguća je modulacija Šumanovim talasima** stavljanjem prekidača «Schumann modulation frequency» u položaj «ON» i tada je dejstvo polja jačeg intenziteta.

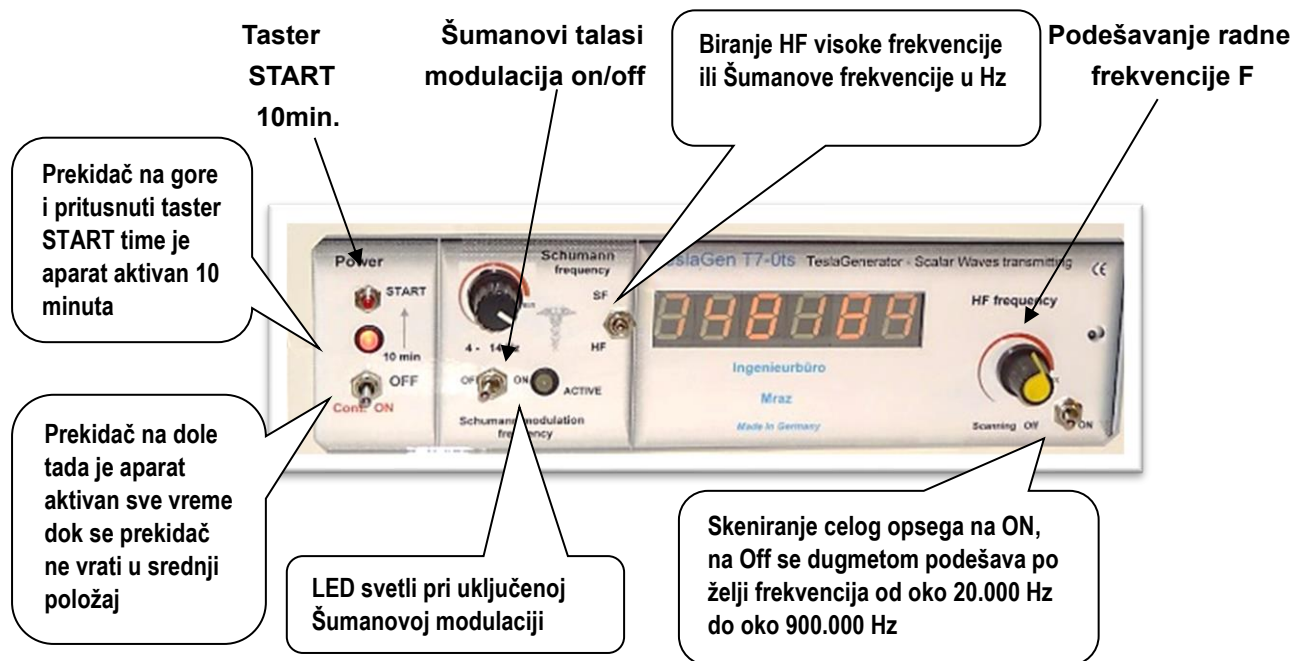

Modulacija uključena (položaj prekidača ON)  
ili isključena (položaj prekidača OFF)

Podešavanje modulacione frekvencije  
Šumnovih talasa od 4Hz do 15Hz

UKLJUČENJE na 10 min. Ili continuum  
Modulacija uključena (položaj prekidača ON)  
ili isključena (položaj prekidača OFF)

Podešavanje noseće Tesline frekvencije koja može automatski da se menja u opsegu od oko 200.000 do preko 900.000 Hz (položaj prekidača **Scanning ON**) Ili manuelno dugmetom u položaju prekidača **scanning OFF**


Niže frekvencije oko 200 do 300kHz deluju na noge, srednje od 300 do 700kHz unutrašnje organe a više na glavu I mozak (pažljivo sa višim frekvencijama, samo 10 min.)

## TSW – TESLA SCALAR WAVES


Lekovite frekvencije su ponovo ugledale svetlost dana i mogu da služe zdravlju.

U modernoj mikrobiologiji se frekvencije koriste za obnovu tj regeneraciju oštećenih DNA lanaca.

- Bioenergetski stimulator - poboljšava energetska polja živih bića
- Pomaže cirkulaciju vitalne životne energije
- Obnavlja i harmonizuje bio-energetska polja organizma kao celine i održava energetska ravnotežu svih organa, sve do nivoa ćelijskih struktura - postižu se efekti na celokupni organizam
- Vitalizuje hranu i vodu za ljude, životinje i biljke
- Skalarno polje deluje podsticajno na rast biljaka
- Aparat TSW je vrsta **bio-energetske fontane**, fontane životne energije koja stimuliše energetska polja čoveka sa svojim prirodnim okruženjem i stvara vrlo kvalitetnu životnu sredinu i zdrav ambijent, veoma sličan onom kakav predstavlja prostor čiste i netaknute prirode

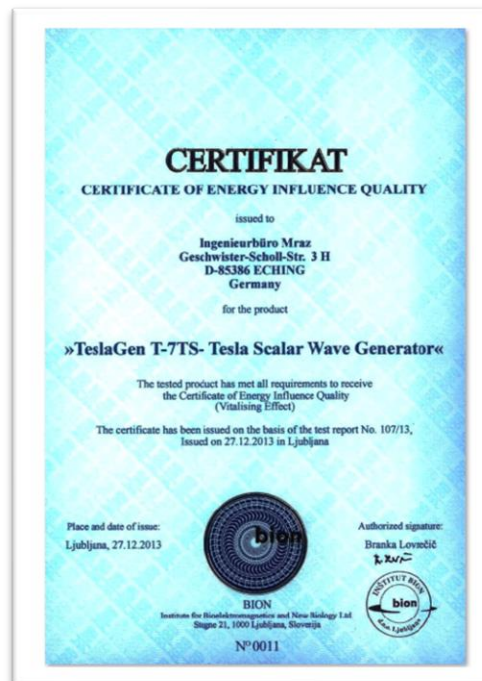

**Snimak specijalnom metodom PIP kamere pokazuje da TSW aparat emituje živo bio-energetsko polje koje reaguje i deluje na žive organizme;**

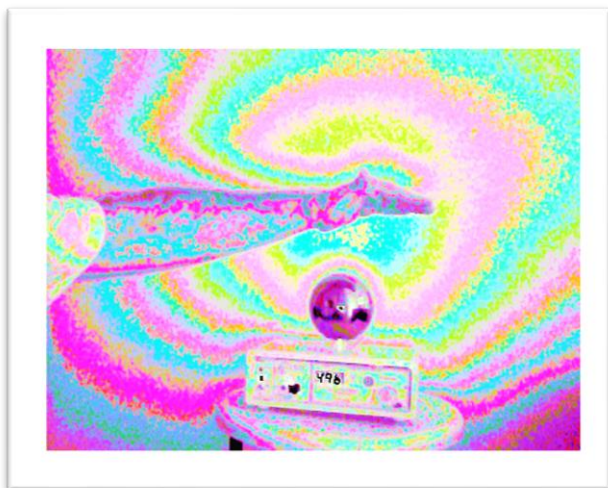

**Činjenica je da su ove vibracije dobre za sve žive organizme i biljke.**

Preporučamo da sveže sirove namirnice stavite u tanjur i držite ih na aparatu oko 30 minuta - dajući genetskom materijalu mogućnost da se aktivira.

**PAŽNJA:** Korištenje aparata se ne preporučuje osobama sa ugrađenim pace-makerom i trudnicama.

Uredjaji su predviđeni kao dopuna uz lekarsku terapiju . Nisu predviđena za dijagnostiku ili lečenje bilo kakvih medicinskih problema. Navedene tabele biofrekvencija su izvorno objavljeni preko interneta i iznesene informacije se ne smeju koristiti kao medicinski saveti.

[www.ibmraz.com](http://www.ibmraz.com)

[www.tmi.rs](http://www.tmi.rs)



Email: [ib.mraz@web.de](mailto:ib.mraz@web.de)